

LEBODY

— FACE —

USER MANUAL

LEBODY

— FACE —



K ČEMU SLOUŽÍ LEBODY FACE?

Lebody Face je přístroj pro domácí používání, který dodává vitalitu, pružnost a liftingový efekt kožním buňkám díky použití mikro proudu.

Lebody Face dosahuje vynikajících změn na pokožce již po krátké době používání.

OBSAH

1 PŘEHLED

OBSAH BALENÍ

2 POPIS PRODUKTU

LEBODY FACE

3 NÁVOD K POUŽITÍ

POSTUP PŘI POUŽÍVÁNÍ LEBODY FACE

JAK POUŽÍVAT LEBODY FACE

LEBODY FACE LED DISPLAY

NABÍJENÍ BATERIÍ

4 UPOZORNĚNÍ

5 VAROVÁNÍ / PÉČE O PRODUKT PO POUŽITÍ

6 SPECIFIKACE PRODUKTU

7 ZÁRUKA

1 PŘEHLED

• OBSAH BALENÍ

LEBODY FACE balení obsahuje následující položky



LEBODY FACE



Nabíjecí kolébka



USB nabíjecí kabel



Návod k použití




Obal

Položky nemusí vypadat stejně jako na obrázku v závislosti na modelu a výrobních změnách.

2 POPIS PRODUKTU

• LEBODY FACE

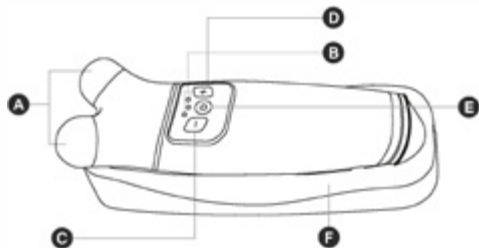

Ozn. NÁZEV

A Mikroproudové jednotky (Faceball)

B LED display

C Ovládání intenzity mikroproudu: snížení(-)

D Ovládání intenzity mikroproudu: zvýšení(+)/přepínání programů

E Zapnutí / vypnutí přístroje

F Nabíjecí kolébka

FUNKCE

Oblasti, na kterých je vytvářen mikroproud

Oblast, kde je indikován program a intenzita. Zmačkněte a podržte na 2 až 3 sec pro přepínání mezi **I** a **L** programy

přepínání programů. Zmačkněte a podržte na 2 až 3 sec pro přepínání mezi **I** a **L** programy

Tlačítko pro zvýšení intenzity výstupu. Zmačkněte a podržte na 2 až 3 sec pro přepínání mezi **I** a **L** programy

Zmačkněte a podržte 2 až 3 sec pro zapnutí/vypnutí

Držák pro LEBODY FACE během nabíjecího procesu

• **I** program

Tento program podporuje vstřebávání pleťových krémů. Aplikujte Lebody Renewal UP Cream a použijte přístroj k ošetření celého obličeje po dobu 5 až 10 minut.

• **L** program

Tento program podporuje zlepšení pružnosti pokožky díky stimulaci kůže mikroproudem. Aplikujte Lebody Renewal Face Water Gel a použijte přístroj k ošetření celého obličeje po dobu 5 až 10 min.

Návod k použití LEBODY FACE

3 POSTUP POUŽITÍ

1 Očistěte obličej



Vyčistěte obličej a osušte do sucha. Pro muže: doporučujeme oholit tvář před použitím přístroje.

2 Aplikujte kosmetické krémy



Použijte Lebody Renewal UP Cream nebo Renewal Face Water Gel podle toho jaký program chcete nastavit. (Pokud chcete použít oba programy po sobě, aplikujte na obličej nejprve Lebody Renewal UP Cream pro **I** program a potom aplikujte Renewal Face Water Gel pro **L** program.)

Krémy se prodávají samostatně, nejsou součástí balení přístroje



Lebody Renewal UP Cream pro **I** program



Renewal Face Water Gel pro **L** program

③ Zapněte přístroj ④ Zvolte program ⑤ Nastavte intenzitu



Zmákněte a podržte tlačítko pro zapínání přístroje ON na 2-3 vteřiny a zapněte přístroj. Stlačte a podržte tlačítko [-/+] na 2-3 vteřiny a zvolte požadovaný program. Stlačte tlačítko [-/+] a nastavte intenzitu mikroproudu.

I program (nastaven jako výchozí program)

L program

Doporučená délka ošetření je 5 až 10 minut pro každý program

⑥ Používání přístroje




Ujistěte se, že obě mikroproudové jednotky (Faceball) doléhají současně na tvář.

LEBODY FACE se automaticky vypne po 10 minutách.

Návod k použití LEBODY FACE

Postupujte v pořadí a dle popisu ukázaných na vyobrazeních níže. Pohybujte přístrojem zespoda nahoru. (Ujistěte se, že obě Faceball jednotky jsou v těsném kontaktu s pokožkou.) Pokud máte problematickou pleť, po použití přístroje si obličej omyjte teplou vodou.

Začáteční bod

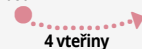

4 vteřiny

Přesuňte se do další oblasti, když uslyšíte zvukový signál.

Přesuňte přístroj ze začátečního bodu dál ve směru šipky.

KROK 1

Posunujte přístrojem podle vyobrazení. Přesuňte Faceball elektrody do další oblasti ošetření každé 4 vteřiny, když uslyšíte zvukový signál. Ujistěte se, že obě Faceball jednotky jsou v těsném kontaktu s pokožkou.



KROK 2



※ Postupte stejně i na druhé straně obličeje.

• LEBODY FACE LED DISPLAY

- **I program:** Modrá LED dioda svítí (výchozí program po zapnutí)
- **L program:** Červená LED dioda svítí
- Vybité baterie: Červené LED diody probliknou 5x a pak se přístroj vypne
- Nabíjení: Modré LED diody problikávají zleva doprava
- Plně nabitá: Modré LED diody problikávají

Vybité baterie	Nabíjení	Plně nabitá
Červené LED diody probliknou 5x a pak se přístroj vypne	Modré LED diody problikávají zleva doprava	Modré LED diody problikávají

• STAV NABÍJENÍ BATERIE

- Zapněte LEBODY FACE a umístěte jej na nabíjecí kolébku. Modrá LED kontrolka bude blikat zleva doprava, což znamená, že se přístroj nabíjí. Když umístíte přístroj na nabíjecí kolébku a modrá LED bliká, znamená to, že baterie je plně nabitá.
- Přístroj je z výroby dodáván s 30% nabitou baterií. Před prvním použitím přístroj nabijte. Pokud je baterie v důsledku přirozeného vybití výrazně vybitá, může její úplné nabití trvat poměrně dlouho.
- Plné nabití baterie trvá přibližně 2 a půl hodiny. Baterie vydrží v průměru nejméně 7 hodin v I programu a 5 a půl hodiny v L režimu, pokud je přístroj používáno na úrovni 3.
- Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, před uložením přístroj plně nabijte a jednou za měsíc ho opět plně nabijte, abyste zabránili nadměrnému opotřebení baterie.
- Pokud se přístroj nenabíjí déle než měsíc, nemusí se zapnout, protože je baterie příliš vybitá. V takovém případě použijte přístroj až po dobití baterie.
- Pokud se napájení nezapne, nebo pokud se napájení vypne ihned po zapnutí přístroj nebo pokud bliká červená LED kontrolka, znamená to, že je baterie vybitá. V takovém případě baterii před použitím nabijte. Pokud je baterie zcela vybitá, může její úplné nabití trvat o něco déle než obvykle.

4 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

STAV NABÍJENÍ BATERIE

- Zapněte LEBODY FACE a umístěte jej na nabíjecí kolébku. Modrá LED kontrolka bude blikat zleva doprava, což znamená, že se přístroj nabíjí. Když umístíte přístroj na nabíjecí kolébku a modrá LED bliká, znamená to, že baterie je plně nabitá.
- Přístroj je z výroby dodáváno s 30% nabitou baterií. Před prvním použitím přístroj nabijte. Pokud je baterie v důsledku přirozeného vybití výrazně vybitá, může její úplné nabití trvat poměrně dlouho.
- Plné nabití baterie trvá přibližně 2 a půl hodiny. Baterie vydrží v průměru nejméně 7 hodin v I programu a 5 a půl hodiny v L režimu, pokud je přístroj používáno na úrovni 3.
- Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, před uložením přístroj plně nabijte a jednou za měsíc ho opět plně nabijte, abyste zabránili nadměrnému opotřebení baterie.
- Pokud se přístroj nenabíjí déle než měsíc, nemusí se zapnout, protože je baterie příliš vybitá. V takovém případě použijte přístroj až po dobití baterie.
- Pokud se napájení nezapne, nebo pokud se napájení vypne ihned po zapnutí přístroj nebo pokud bliká červená LED kontrolka, znamená to, že je baterie vybitá. V takovém případě baterii před použitím nabijte. Pokud je baterie zcela vybitá, může její úplné nabití trvat o něco déle než obvykle.

4 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Při používání přístroje v režimu I nebo L můžete pociťovat mírné štípání nebo znečítivění. V tomto případě snižte intenzitu mikroproudu, abyste tento pocit omezili.
- Při používání přístroje v režimu I nebo L můžete dočasně vidět záblesk světla v důsledku stimulace zrakových nervů.
- Pokud výše uvedený příznak přetrvává, i když zařízení nepoužíváte, přestaňte zařízení používat.
- Při pravidelné péči o výrobek postupujte podle pokynů v části 5. VAROVÁNÍ / PÉČE O PRODUKT PO POUŽITÍ.
- V případě poruchy nebo problémů s přístrojem, kontaktujte prodejce nebo místního distributora ve vaší zemi a požádejte o kontrolu nebo opravu. Pokud neznáte kontaktní informace pro servis ve vaší zemi, obraťte se na místního prodejce a požádejte o kontrolu nebo opravu.

5 VAROVÁNÍ / PÉČE O PRODUKT PO POUŽITÍ

UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte přístroj v kombinaci s následujícími typy zdravotních přístrojů a zařízení, protože v případě poruchy přístroje nebo v případě nehody může dojít k vážnému fyzickému poškození:

- Elektrické zdravotní přístroje, která jsou implantována do těla, např. kardiostimulátor;
- Elektrická zařízení na podporu života, jako je umělý kardiopulmonální systém;
- Elektrické lékařské zařízení s částmi umístěnými na těle, jako je elektrokardiogram;
- Lékařská zařízení, která se připojují k tělu, jako je inzulinová pumpa;

※ **VAROVÁNÍ:** Zařízení by nemělo být používáno následujícími osobami nebo na následujících částech těla:

- Osoby, které nedávno podstoupily kosmetický chirurgický zákrok nebo v současné době podstupují dermatologickou péči a léčbu
- Oblasti postižené vaskulitidou, tromboflebitidou, poškozením kapilár, křečovými žilami nebo jakýmkoliv jiným cévním onemocněním nebo oblastmi s kožní vyrážkou, zánětem, infikovanou kůží nebo oteklou kůží
- Oblasti kolem očí (kruhové svaly uvnitř infraorbitalim), spánky, krk (štítná žláza), hrudník nebo rozkrok
- Jednotlivci s akutním onemocněním
- Těhotné ženy
- Děti do 18 let
- Jedinci, kteří vykazují abnormální reakci na elektrickou stimulaci
- Jedinci s alergiemi na kovy
- Jedinci s kapilární dilatací
- Jedinci s kovovým implantátem nebo jinými implantáty
- Jedinci s epilepsií nebo záchvaty
- Jedinci, kteří zažili krvácení po akutním traumatu nebo zlomenině
- Jedinci, kteří mají protetickou pomůcku pro ortodoncii
- Jedinci, kteří mají v obličeji kovové zařízení po operaci

* Péče o produkt po použití

Po použití produktu otřete Faceballs elektrody vlhkým hadříkem a suchým ručníkem, aby na zařízení nezůstaly cizí předměty. (Neomývejte vodou ani tekutinou)

6 SPECIFIKACE PRODUKTU

• LEBODY FACE

Název produktu	LEBODY FACE
Označení modelu	White : [LEF-100] / Dark Purple : [LEF-200]
Nabíjení	(battery) DC 3.7V, 5100mAh
Rozměry	142mm x 51mm x 41mm
Hmotnost	138g
Země původu	Made in Korea
Výrobce	GTG Wellness Co., Ltd.
Adresa	A-902-904, Bundang Suji U-Tower, 767, Sinsu-ro, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
A/S	+82) 02-3462-5400



Broadcasting and Communication Equipment
Certification Registration No.
MSIP-REM-sMC-LEF-100

7 ZÁRUKA

• Záruční podmínky

- 1 Záruční doba: jeden rok od data nákupu (avšak u problémů vyplývajících z příčiny zaviněné zákazníkem bude servis poskytován za poplatek)
- 2 Rozsah záruky: Zařízení LEBODY FACE a příslušenství
- 3 Záruka pozbývá platnosti a oprávnění, pokud byl přístroj opraven zákazníkem bez povolení výrobce.
- 4 Výrobce odpovídá pouze za opravu výrobku v záruční době.
- 5 Záruka se vztahuje na veškerý systém LEBODY FACE a příslušenství, které byly správně používány.
- 6 Záruka se nevztahuje na problémy způsobené nesprávným použitím nebo náhodným poškozením.
- 7 Uživatelé musí dodržovat požadavky poskytnuté výrobcem v souvislosti s podmínkami prostředí a jmenovitým výkonem pro použití.
- 8 Výrobce nemůže nést odpovědnost za jakékoli problémy vzniklé v důsledku svévolné úpravy, demontáže a/nebo opravy provedené koncovým uživatelem.

Kategorie výrobku	Přístroj pro péči o pleť
Název výrobku (název modelu)	LEBODY FACE WHITE: [LEF-100] DARK PURPLE: [LEF-200]
	Záruční doba ※ jeden rok od data nákupu
	※ Záruka na vnitřní baterii je 6 měsíců
Datum výroby	
Zákazník	
Adresa	
Kontakt	

LEBODY
— FACE —